


WD-150

ウォッシャーディスインフェクター



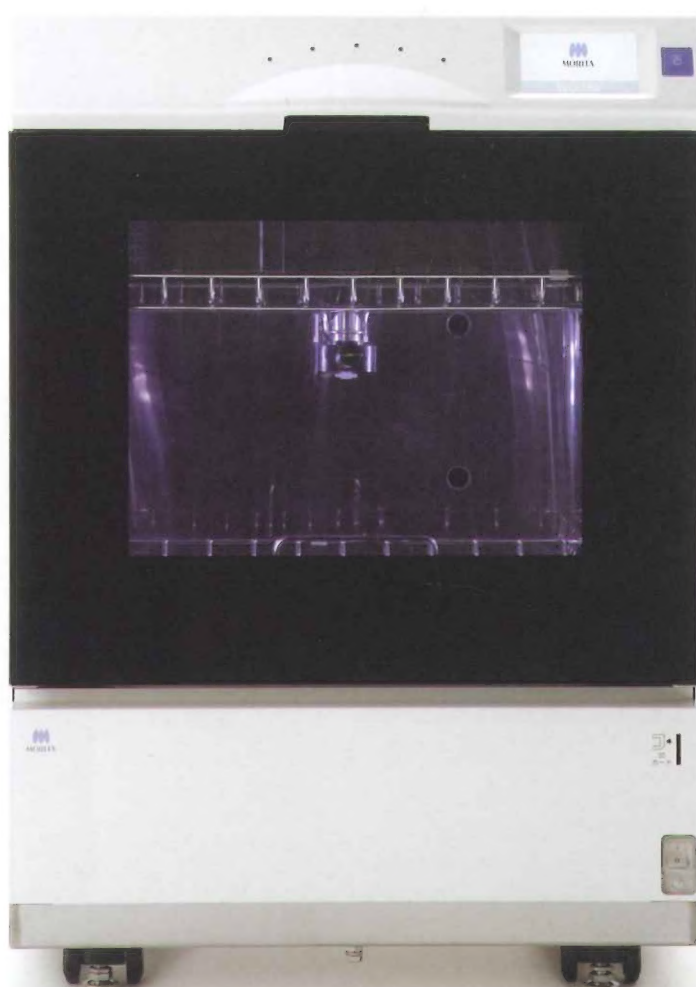

WD-150

歯科診療にさらなる安全と効率を

インスツルメントやハサミなど、先端の鋭利な器具の手洗いによる洗浄は、切創のリスクだけでなく、感染の原因になる危険性があります。洗浄・消毒作業を全自動で行う器具除染洗浄機「WD-150」が、これらの問題を解決し、日々の歯科診療にさらなる安全と効率をもたらします。



洗浄・消毒にかかる業務を効率化

器具の洗浄・消毒から乾燥を、全自動で行うことが可能ですので、手洗いに割いていた時間を患者さんの診療やケアの向上に注力していただくことができます。



洗浄中のケガによる感染を防止

手洗いの場合、手袋をしていたとしても、先端の尖った器具や鋭利なハサミなどでケガをする恐れがあります。WD-150は自動で洗浄・消毒が行えるため、切創による感染のリスクを未然に防ぐことができます。




洗浄・消毒業務のレベルを均一化

器具の溝やタービンの細管内部など、細かい部分まで洗浄・消毒ができるため、作業者の経験や知識に関係なく、作業レベルを均一化させることができます。

収納例


- ・ バット …………… 22枚
- ・ ハンドピース類 …… 10本
- ・ 吸引管 …………… 10本
- ・ 鉗子類 …………… 7本
- ・ IMSカセット
- ・ インスツルメント、リーマー、ファイルスタンド
ほか

Features

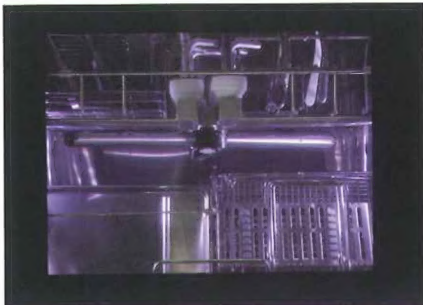

洗浄室内の様子が一目でわかる
シースルーパネル

洗浄室内の様子が確認できるシースルー
パネルを採用。

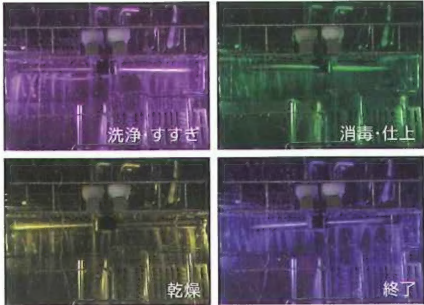

洗浄～乾燥までの工程を色で確認

洗浄室内にはLEDライトを搭載。洗浄・す
すぎ、消毒・仕上、乾燥、終了の工程を、色
の変化で確認できます。

※下記、表を参照ください。



ハンドピース洗浄アダプターをラインナップ

洗浄室内にハンドピース専用アダプターを
搭載。ハンドピース10本、吸引管10本を1度
に洗浄・消毒、乾燥することができます。

多彩な洗浄／消毒コースを搭載

「すすぎ10分」から「93℃ 10分洗浄／消毒」まで、多彩なコースを搭載。


滅菌モード	工程	運転時間(目安)
洗浄／消毒 80℃ 10分	予備洗浄 ▶ 洗浄 ▶ すすぎ ▶ 消毒 (80℃ 10分) ▶ 仕上 ▶ 乾燥	約55～75分
洗浄／消毒 90℃ 5分	予備洗浄 ▶ 洗浄 ▶ すすぎ ▶ 消毒 (90℃ 5分) ▶ 仕上 ▶ 乾燥	約60～80分
洗浄／消毒 93℃ 10分	予備洗浄 ▶ 洗浄 ▶ すすぎ ▶ 消毒 (93℃ 10分) ▶ 仕上 ▶ 乾燥	約70～90分
洗浄	予備洗浄 ▶ 洗浄 ▶ すすぎ ▶ 仕上 ▶ 乾燥	約36～56分
すすぎ	すすぎ	約10分
庫内洗浄／ 消毒モード	消毒 (93℃ 10分) ▶ すすぎ	約45分

※乾燥・仕上剤の工程あり／なしは選択できます。
※供給水が常温の場合は、約15～20分程度長くなります。




わかりやすい日本語表示のタッチパネル

WD-150は国産製。タッチパネルのディス
プレイは全て日本語で表示されますので、
洗浄・消毒コースの選択はもちろん、エラー
が出た際も一目で内容がわかります。

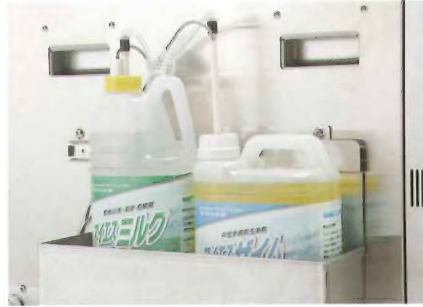

洗剤は自動で計量・投入

専用の洗剤ボトルをWD-150側面にセッ
トし、チューブで接続。自動で洗浄庫内に必
要量が投入されるため、洗浄の度に計量し
てセットする必要がありません。

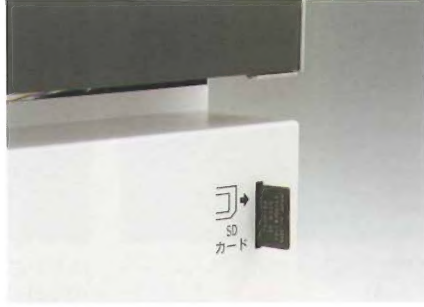

洗浄の記録と設定を
本体(約20回分)とSDカードに保存

作業工程の記録と設定内容を保存。データ
は、本体(約20回分)とSDカードに記録し
て残しておくことができます。



ハンドピースの洗浄、消毒、乾燥が可能

高温洗浄マークのついているハンド
ピースの洗浄、消毒、乾燥が可能です。



低温排水装置を搭載

消毒に使用した熱水を冷却して排出する
低温排水装置を標準搭載しているため、
耐熱排水管工事が不要です。

スピーディーな温風乾燥

洗浄・消毒後は、バクテリアフィルターを
通した清潔な温風でスピーディーに乾燥し
ます。

国際規格(ISO15883)では、観血処置で使用了器具を熱水消毒するには
ウォッシャー・ディスインフェクターでA₀値3000(90℃ 5分)以上を達成することが求められています。

Item Line up



標準ラック
(上段)
85,000円 272102
W462*×D455*×H27.5mm
○下段ラックは付属品です。○注文時にどちらか選択していただけます。



ハンドピース用ラック
(上段)
230,000円 272103
W462*×D455*×H49.5mm



インストルメントスタンド
85,000円 272109
W221×D165×H110*mm



鉗子スタンド
21,000円 272110
W100×D190×H110mm

※内側の有効寸法



トレースタンド
23,000円 272111
W255*×D445*×H122mm



蓋付バスケット
50,000円 272112
W155*×D205*×H49*mm



カセットスタンド
24,000円 272113
W180×D444×H147mm



メッシュバスケット
49,000円 272114
W180*×D445*×H85*mm



ストレート、コントラ用 組合せ



タービン用 組合せ



- ① SUSフィルター(10枚入り)
12,000円 272105
- ②+③ ハンドピースホルダー(1個)
23,000円 272104
- ④ シリコンアダプター CA用
(2個入)
3,000円 272107
- ⑤ シリコンアダプター
タービン用(2個入)
3,000円 272106
- ⑥ 吸引管立て(10個入)
38,000円 272108



専用 多酵素洗剤 アイエスザイム
2L×4本
18,000円 272115



専用 仕上げ剤 アイエスマルク
2L×4本
18,000円 272116



専用 洗浄槽内洗浄剤
アイエス・デック 500g(5回分)
4,000円 272117



ネスコスト・C W・Iインジケータ
100枚入
11,000円 272118



ネスコスト・C W・Iホルダー
11,300円 272119

BC-17 クラスBオートクレーブ



標準価格:998,000円 272001
販売名:クラスBオートクレーブ BC-17
一般的名称:小型包装品用高圧蒸気滅菌器
機器の分類:管理医療機器(クラスⅡ)/特定保守管理医療機器
医療機器認証番号:225AKBZX00091A01
製造販売:チヨダエレクトリック株式会社
発売:株式会社IHIシバウラ

Specifications

販売名:ウォッシャー・デイスインフェクター WD-150
型式:WD-150
電源電圧:単相200V ±10%
消費電力:15kVA以下
質量:85kg
一般的名称:器具除染用洗浄器
機器の分類:一般医療機器(クラスⅠ)

医療機器届出番号:20B2X10010000002
付属品:排水ホース(1.5m)×2、SDカード×1

標準価格:1,730,000円 272101

外形寸法:W580×D635×H780+キャスター60mm
槽内寸法:W500×D485×H490mm
除染温度・時間:80℃/10分、90℃/5分、93℃/10分
全行程時間:約10~90分
乾燥工程:有(温風乾燥)
モード:5パターン
洗浄剤:多酵素洗浄剤・仕上げ剤

Diagnostic and Imaging Equipment

Treatment Units

Handpieces and Instruments

Endodontic System

Laser Equipment

Laboratory Devices

Educational and Training Systems

Auxiliaries



販売

株式会社 **モリタ**

大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 TEL 03. 3834 6161

製造販売 チヨダエレクトリック株式会社
長野県千曲市大字新田124 〒387-0018

発売 株式会社IHIシパウラ

Morita Global Site: www.morita.com

More Infos about Products: www.dental-plaza.com

ご使用に際しましては、製品の添付文書および取扱説明書を必ずお読みください。
仕様及び外観は製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
製品の色は印刷のため、実際とは異なる場合がございます。

PUB: NO. M207.1951-1-000.1311.67,000II-JPC

MICS

Morita Infection Control System

モリタは院内感染予防を総合的にプロデュースします。